

開催記念 キャンペーン

キャンペーン期間 2026. 9.24 — 10.20 《数量限定》

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「第6回国際歯科シンポジウム 開催記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

A
コース

キャンペーン期間中、G-ボンド ユニバーサル 2本包装・単品包装 を

特別価格 にてご提供！

1本でボンディング処置もプライマー処理も！

ウォーターフリーが導く新たなテクノロジー

エアブローなしでも使える

マルチユースな「1液性ボンディング材」



ユニバーサル アドヒーズブ

G-ボンド ユニバーサル

保険適用

専門サイトはこちら

2本包装 包装・希望医院価格 ● 2本包装1函: G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL) 2本 = ¥32,700

単品包装 包装・希望医院価格 ● 1本包装1函: G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL) 1本 = ¥18,900

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 /
歯科用シーリング・コーティング材 / 歯面コーティング材
ジーシー G-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00014000



New

B
コース

キャンペーン期間中、G-フロー ONE 2.0mL 1本 を

特別価格 にてご提供！

ユニバーサルシェードにさらなる付加価値を

1本で幅広いシェードに対応する

ユニバーサルタイプのインジェクタブルレジン

シングルシェード充填用インジェクタブルレジン

G-フロー ONE

保険適用

専門サイトはこちら

包装・希望医院価格 ●
1袋: シリッジ 3.4g (2.0mL) 1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、
フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個 = ¥4,000

歯科充填用コンポジットレジン ジーシー G-フロー ONE
管理医療機器 306AKBZX00075000



A

コース



ウォーターフリーが導く新たなテクノロジー エアブローなしでも使える「1液性ボンディング材」

ユニバーサル アドヒーズ
G-ボンド ユニバーサル

保険適用

専門サイトはこちら



2本包装 包装・希望医院価格 ●2本包装1箱 : G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL)2本 = ¥32,700

単品包装 包装・希望医院価格 ●1本包装1箱 : G-ボンド ユニバーサルボトル(5mL)1本 = ¥18,900

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材 / 歯面コーティング材
ジーシー G-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00014000

エアブロー条件に依存しない接着性能 ボンディング層の厚みに影響されない接着強度


接着阻害となる水を含まないため、エアブローなし / 弱圧 / 強圧、どの条件下でも安定した接着力を有します。
エアブロー条件を撤廃することで、術者の違いで起こる **テクニカルエラーを低減** します。

テクニカルエラーの例


- 水分の除去不足
- 浸出液が窩洞に入ってしまう

■各エアブロー条件下の接着強度

*ISO 29022:2013を部分的に引用し測定 *エナメル質・象牙質それぞれの条件における一元配置分散分析(ANOVA, $\alpha=0.05$)にて統計処理を実施。有意差なし。

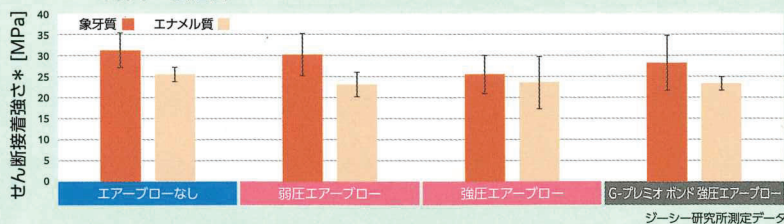

■各エアブロー条件下の被膜厚さ (SEM 画像 x1000)

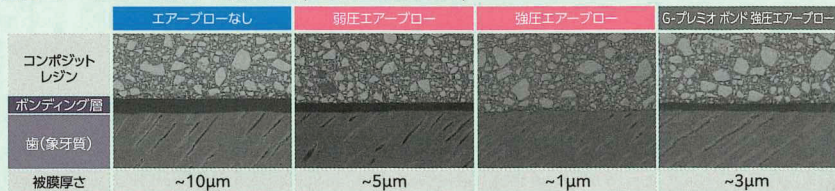

エアブローなしはこんな時に!

- エアブローの圧力で出血しそうな場合
- エアブローをかけると浸出液が窩洞に入りそうな場合
- 知覚過敏がありエアブローをかけるとしみる場合
- 歯肉縁下などコンタミ予防が難しい場合
- 小児や高齢者など長時間の開口が難しい場合
- ボンディング液を飛び散らせたくない場合 など

エアブローありはこんな時に!

- ボンディング層を薄くしたい場合 など

トリブエー テック
AAA Tech

ウォーターフリーが導く新たなテクノロジー

G-ボンド ユニバーサルでは、独自技術「**AAA Tech (Anhydrous Amphiphilic Adhesive Technology)**」を採用。

両親媒性アミドモノマーの働きにより、歯質への濡れ性と密着性が向上し、

歯質に残るわずかな水分を利用して10-MDP*が脱灰と接着にしっかり作用します。

また、残留した場合に接着阻害となる水を含まず新たに開発した高強度ジメタクリレートモノマーを配合することで、
ボンディング層そのものの強度を高めたまま、厚みに左右されない安定した接着強度を実現しました。

*10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate



WATER-FREE
ウォーターフリー

Anhydrous

ウォーターフリー
接着阻害となる水を含まず、
水除去のための
エアブローは不要

Amphiphilic


両親媒性アミドモノマー
歯質への浸透性を高め、
濡れ性を最適化

Adhesive

10-MDP*, 高強度ジメタクリレートモノマー
機能性モノマーによる化学的接着と、
硬化したボンディング層の物理的強化

マルチユース 1本でボンディング処置もプライマー処理も

■各種補綴装置への接着強度

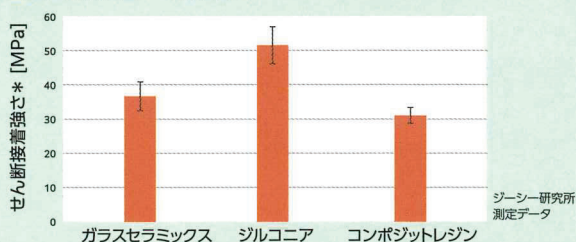

*ISO 29022:2013を部分的に引用し測定 *左記はエアブローなし条件下における数値です。

水を含まないため、ボトル内でシランカップリング剤が加水分解しにくく、成分が長期間安定して保持されます。
そのため、ガラスセラミックスやジルコニア、コンポジットレジンの被着面にも接着し、幅広い用途に使用できます。
被着面の材質によって塗り分ける必要がなく、面倒なりペア作業もスピーディーに行えます。

歯質脱灰および歯質、金属、ジルコニアへの接着に	10-MDP*
ボンディング層強化に	高強度ジメタクリレートモノマー
歯質への浸透性向上に	両親媒性アミドモノマー
ガラスセラミックス、コンポジットレジンへの接着に	シランカップリング剤

*10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

マルチに使えるG-ボンド ユニバーサル1本でOKに!




レジンインフィルトレーション

初期う蝕やホワイトスポットなどの白濁に対して、
G-ボンド ユニバーサルを浸潤させることで白濁を改善します。

ホワイトスポット

脱灰により歯質に空隙が生じ、疎になった領域

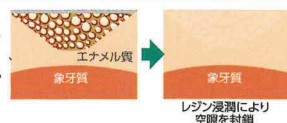

Result

白濁が改善

歯科接着用レジンセメント
ジーセム ONE EM

歯科接着用レジンセメント
管理医療機器 301AKBZX00021000

ジーセム ONE EM

歯科接着用レジンセメント
ジーセム ONE neo

歯科接着用レジンセメント
管理医療機器 228AKBZX00104000

実用性◎

- 塗布後の待ち時間ゼロ
- 室内保管OK
- 1滴の滴下量が少なく経済的
- 採取しやすい1ドロップボトル

硬化後は
ほぼ無色透明

※厚み約50μm



B コース

ユニバーサルシェードにさらなる付加価値を



シングルシェード充填用インジェクタブルレジン

G-フロー ONE

保険適用

包装・希望医院価格 ●1袋: シリンジ 3.4g (2.0mL) 1本、フィリングチップⅢプラスチック2個、フィリングチップⅢニードル1個、フィリングチップ用キャップ1個=¥4,000

歯科充填用コンポジットレジン シーシー G-フロー ONE
管理医療機器 306AKZX00075000


専門サイトはこちら



1本で幅広いシェードに対応する ユニバーサルタイプの インジェクタブルレジン

◆最適化された光透過性・光拡散性・彩度

粒度の異なるフィラーの組み合わせにより光拡散性が向上し、レジンマトリックス内部で色を拡散させ、より優れたカメレオン効果をもたらします。これまでのGCのCR開発の経験を活かし、光透過性、光拡散性、彩度を最適化することで、ワンペーストで様々な色調に適合するCR開発を達成しました。

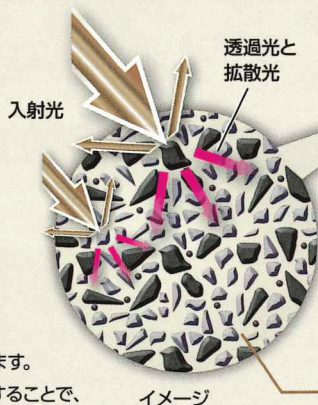

イメージ



G-フロー ONE

最適化された光透過性と光拡散性により裏打ちが無くても色がなじむ



光拡散性の低いCR

光が直進するので裏打ちが無いと透けて暗く見える

粒度の異なるフィラー



バリウムガラス
フィラー
300 nm



バリウムガラス
フィラー
150 nm



微粉末
シリカ
16 nm

VITA 16シェードの人工歯に充填

充填部位



充填部位: Ⅲ級窩洞

切端隅角を含まず、前歯・大歯の隣接面も含んでいる窩洞形態

充填部位: Ⅱ級窩洞

白歯部の隣接面を含む窩洞形態


【症例】Ⅱ級窩洞

「G-フロー ONE」1本でCR修復を幅広くサポート！
各窩洞に対する症例を多数掲載した症例集でお確かめください。

全13症例を掲載！



術前

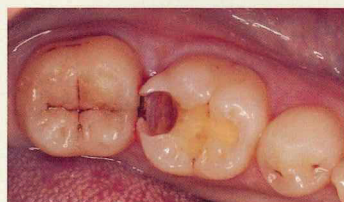

窩洞形成後



ボンディング処理後、G-フロー ONE充填・研磨後



症例集は
こちら▶



さらなる付加価値

Point 1 ツヤが出やすく、長期的に維持する

Point 3 高い曲げ強度と優れた耐摩耗性

Point 2 低吸水で着色しにくい

Point 4 使いやすいフロー性状

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2026年9月24日～10月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者
様	

対象製品		ご注文数
A コース	G-ボンド ユニバーサル	2本包装 (5mL 2本)
		単品包装 (5mL 1本)
B コース	G-フロー ONE 2.0mL 1本	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

新製品のご案内

ユニバーサルレジンセメント 保険適用

ジーセム ユニバーサル ジーセム ユニバーサル カートリッジ

2026
11.24
発売

オートミックスタイプ

歯科用合着・接着材料I
自動線型

36点



歯科接着用レジンセメント
ジーシー ジーセム ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00104000

ハンドミックスタイプ

歯科用合着・接着材料I
標準型

17点



歯科接着用レジンセメント
ジーシー ジーセム ユニバーサル カートリッジ
管理医療機器 307AKBZX00105000



シンプル操作で より安定した接着へ
～シランカップリング剤配合のオールラウンド レジンセメント～

色調	トランスルーセント (TR)	ユニバーサル (UL)	オペーク (O)	ホワイトオペーク (WO)
おすすめ	セラミックスや CAD/CAMのインレーに	メタルからセラミックス、CAD/CAM冠まで幅広く使用可能	メタルコアに CAD/CAM冠を装着する症例に	変色歯の症例に

X線透視性あり

1本で幅広い症例に適応 保険から自費までこれひとつ！

ペースト内にシランカップリング剤と機能性モノマー（10-MDP*）を配合。メタル、ジルコニアはもちろんハイブリッドレジン、セラミックスなど様々な材質の補綴装置に接着*します。

*10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
*より安定した接着を求める場合には、窩洞または支台歯にG-ボンド ユニバーサルを使用

適応症例

*メタル		*CAD/CAM		*PEEK*1
インレー/アンレー	クラウン/ブリッジ	インレー/アンレー	クラウン/ブリッジ	クラウン

*1 G-ボンド ユニバーサルをプライマーとして使用します。詳しくは電子添文をご確認ください。
*2 単冠に限る。



メタルクラウン
(金銀パラジウム合金)

CAD/CAMハイブリッドレジン
クラウン

オールセラミックスクラウン
(ジルコニア+レイヤリング)

オールセラミックス
(ニッケイ酸リチウム)
テーパートップクラウン

PEEK冠
※PEEK冠内面にG-ボンド ユニバーサル
塗布必須

より安定した接着へ

ジーセム ユニバーサル × G-BOND Universal

より安定した接着を追求したユニバーサルシステム

直接修復に使用できるG-ボンド ユニバーサルとの併用により、さらに幅広い症例に適応。



補綴装置内面も窩洞・支台歯も“G-ボンド ユニバーサル”1本でOK。ウォーターフリーのボンディング材のため、エアブローなしでも使用可能です。

《インレー・クラウンを想定した場合》

補綴装置側*1						窩洞・支台歯側		
メタル	ジルコニア*2	セラミックス (ニッケイ酸リチウム系・ 長石系)*2	ハイブリッド レジン*2	CAD/CAM ハイブリッド レジン*2	PEEK	レジンセメント	歯質*1	レジンコア
プライマー処理不要						必須 G-ボンド ユニバーサル塗布 →光照射	CAD/CAM冠など より安定した接着を求める場合、 G-ボンド ユニバーサルの使用を推奨	

*1 CAD/CAM冠(PEEK冠を含む)、CAD/CAMインレー、CAD/CAMブリッジ、高強度硬質レジンブリッジ、接着ブリッジは、歯質に対する接着性を向上させることを目的に、アルミナ・サンドブラスト処理(補綴装置)およびG-ボンド ユニバーサルでプライマー処理(補綴装置および歯質、またはいずれか)した場合、内面処理加算の保険算定可能。
*2 より安定した接着を求める場合、G-ボンド ユニバーサルを使用可能

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は